

# Götze & Jensen



## INTELIĞENTNA WAGA ŁAZIENKOWA BS901BT

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Zanim staniesz na wagę upewnij się, że jej powierzchnia jest sucha, aby nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
3. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie.
4. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana baterii.
5. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na płycie wagi w trakcie przechowywania.
6. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
7. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -), znajdujących się w schowku na baterie.
8. Wyjmij baterie z wagi gdy nie będziesz jej używać przez dłuższy czas.
9. Upewnij się, że baterie nie znajdują się w zasięgu małych dzieci i nie mają one do nich dostępu.
10. W przypadku poknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
11. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Urządzenie generuje fale radiowe, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń medycznych np. rozruszników serca, implantów ślimakowych, aparatów słuchowych. W trakcie korzystania z urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm od urządzeń medycznych.

14. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach zabronionych np. szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy postępować zgodnie z regulaminem ustalonym przez te placówki.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## DANE TECHNICZNE

Model:	BS901BT
Wyświetlacz:	LED
Bateria:	3x AAA, 1.5V
Pamięć osobistych ustawień:	8
Minimalne obciążenie:	5 kg
Maksymalne obciążenie:	180 kg
Dokładność pomiaru:	100g; 0.2lb; 1/4st
Jednostki miary:	kg/lb/st
Maksymalne ustawienie wzrostu użytkownika:	250 cm
Zasięg łączności Bluetooth:	do 10 m
Maksymalna moc transmisji Bluetooth:	-0,12 dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth:	2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth:	2402-2480 MHz

## OPIS URZĄDZENIA

1. Wyświetlacz LED.
2. Przycisk zmiany jednostki pomiaru.
3. Nóżki.
4. Pokrywa schowka baterii.
5. Szklana płyta przewodząca prąd.
6. Element dekoracyjny.



**UWAGA! PODCZAS POMIARU WAGI, DOPUSZCZA SIĘ PONIŻSZĄ TOLERANCJĘ BŁĘDU POMIAROWEGO URZĄDZENIA.**

50 kg	100 kg	150-180 kg
+/- 0,4 kg	+/- 0,5 kg	+/- 0,7 kg

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij wagę z opakowania. Zdejmij pokrywę schowka baterii na spodzie wagi. Zainstaluj 3 baterie AAA zgodnie z oznaczeniami +/- następnie zamknij pokrywę schowka.
2. Aby ustawić odpowiednią jednostkę pomiaru wagi dociśnij ręką płytę przewodzącą prąd w celu włączenia urządzenia, następnie naciskaj przycisk „UNIT” na spodzie wagi tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia jednostka.
3. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
4. Stań na wadze, na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi ciała (offline).
5. Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po 15 sekundach od ostatniego pomiaru.

# INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI DR. WEIGHT

1. Pobierz aplikację Dr. Weight ze sklepu Play (Android) lub App Store (iOS).






Play (Android)




App Store (iOS)

2. Włącz łączność Bluetooth w ustawieniach telefonu, uruchom aplikację, wybierz jednostkę wagi i wzrostu. Jeśli nie masz jeszcze spersonalizowanego konta użytkownika, utwórz je. Jeśli posiadasz już konto, wystarczy się zalogować lub skorzystaj jako „Gość”:

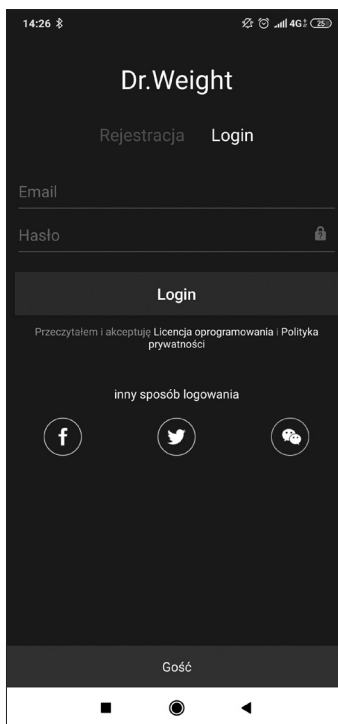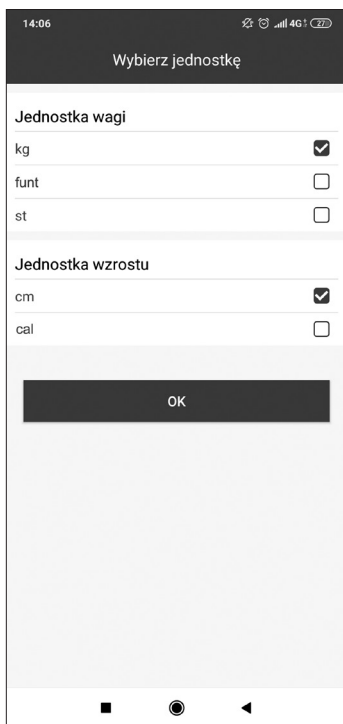


- Uzupełnij dane użytkownika: nazwę, datę urodzenia, wzrost, cel (odpowiednia waga), następnie sparuj urządzenie za pomocą Bluetooth – symbol  na wyświetlaczu wagi przestanie pulsować po poprawnym zsynchronizowaniu urządzeń:

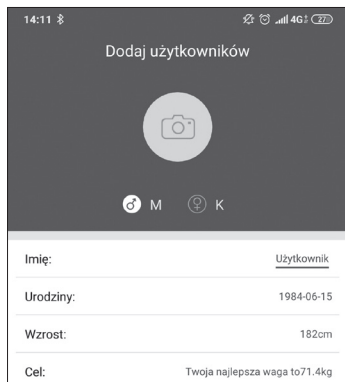


- Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
- Stań na wadze w wyprostowanej pozycji, boso, obiema stopami. Na wyświetlaczu pojawią się i znikną symbole:



informując o dokonywanym pomiarze. Nie schodź z wagi aż do pojawienia się pomiaru na wyświetlaczu. Dane pomiaru m.in. masy mięśni, tłuszczu, poziomu białka, nawodnienia, pojawią się w aplikacji po dotknięciu zakładki „Analiza składu ciała”:

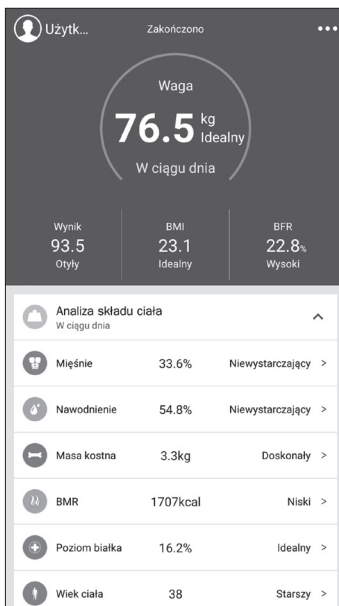

6. Po dotknięciu jednej z danych, pojawi się jej opis oraz wynik w określonym zakresie, przesunąć palcem po ekranie w prawo lub w lewo aby zobaczyć szczegóły kolejnych wartości:

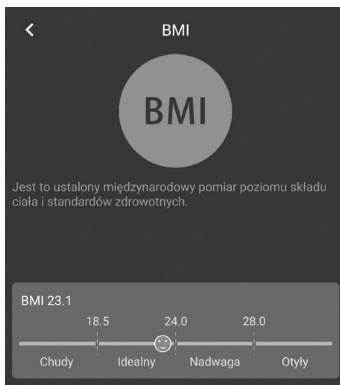


7. Dotykając zakładki „Pomiary” można sprawdzić średnią pomiarów w określonym czasie:



8. Dotknij zakładkę „Ustawienia” w celu ustawień:
- **Zarządzaj użytkownikami:** edycja danych użytkownika, dodawanie lub usuwanie użytkowników.
  - **Przypomnienie o zważeniu:** funkcja przypominająca alarmem o zważeniu wagi ciała (funkcja działa wyłącznie w zasięgu łączności z urządzeniem).
  - **Jednostka:** edycja jednostki wagi i jednostki wzrostu.
  - **Łączność Bluetooth:** zarządzanie ustawieniami łączności Bluetooth, usuwanie dotychczasowych i dodawanie nowych urządzeń.



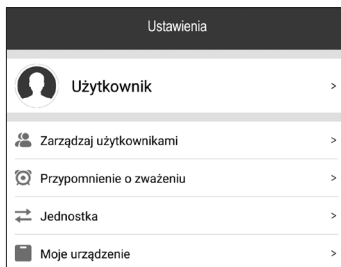

## 9. Waga niemowlęcia

Aby zważyć dziecko, dotknij ... w prawym górnym rogu, następnie dotknij **Waga niemowlęcia**

Krok 1: wejdź na wagę i poczekaj aż urządzenie dokona pomiaru Twojej masy ciała.


Krok 2: wejdź na wagę z dzieckiem na rękach. Aplikacja automatycznie obliczy wagę dziecka.

**UWAGA! DANE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY I NIE POWINNY BYĆ UŻYWANE W CELACH MEDYCZNYCH. U UŻYTKOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH METALOWE ELEMENTY W CIELE, MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓŻNICE W POMIARACH.**

## UDOSTĘPNIANIE

Aplikacja Dr. Weight pozwala na udostępnianie wyników np. na portalach społecznościowych lub ich zapisywanie. Dotknij zakładkę ... w prawym górnym rogu, następnie udostępni przyciskiem

< Udostępnij, następnie wybierz szablon, którym chcesz się podzielić: Dane podstawowe, Historia, Przed i po, Szczegółowy raport:

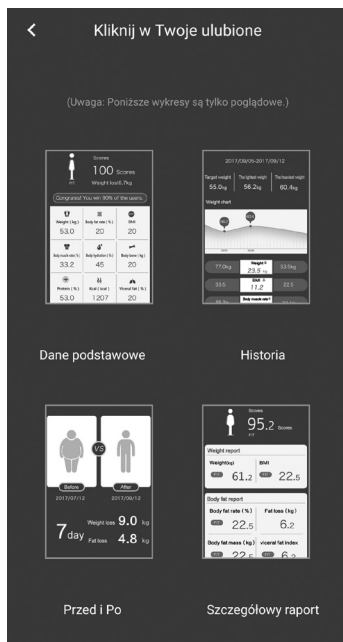

Wybierz portal lub komunikator na którym chcesz udostępnić dane:




## ZALECENIA

1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich powierzchni. Nierówne podłogi mogą mieć wpływ na odczyt.
2. Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zalecane jest ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej porze dnia.
3. Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.

## CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem należy zaprzestać korzystania z urządzenia i wyłączyć aplikację.
2. Wagę należy czyścić suchą ściereczką lub gąbką.
3. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych.
4. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach ani narażać schowka z bateriami na zawilgocenie.
5. Waga powinna być zawsze sucha i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterię na nową.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Err” oznacza to, że maksymalna masa została przekroczona.
3. Jeżeli wystąpił problem z połączeniem za pomocą Bluetooth, wejdź w zakładkę „Ustawienia” następnie w zakładce „Łączność Bluetooth” usuń dotychczasowo połączone urządzenie. Następnie dodaj nowe urządzenie dotykając  w prawym górnym rogu.

## WYMIANA BATERII

1. Otwórz pokrywę na spodzie wagi w schowku na baterie zwalniając zacisk i podnosząc pokrywkę.
2. Wyjmij zużyte baterie i zastąp je nowymi, zgodnie z oznaczeniami +/-.
3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

## DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że waga BS901BT jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

[www.artdom.net.pl/deklaracja/BS901BT/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BS901BT/)

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### **MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!**

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## **WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI ŁAZIENKOWEJ**

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

