



Instrukcja obsługi

Waga elektroniczna z analizą składu ciała



MedM Health



For Android OS 4.3 or Above



MedM Health



For IOS OS 7.0 or Above



OKOK International

Waga i Smartfon

Waga współpracuje z mobilną aplikacją MedM Health i OKOK International.

Mac®, iPad® oraz iPod touch®, są chronionymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. ANDROID™, jest marką zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajach.

Jak rozpocząć

1. Instalacja baterii

Otwórz pokrywę baterii, włóż baterie zachowując odpowiednią polaryzację. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych.

2. Instalacja aplikacji

Zeskanuj odpowiedni kod QR widniejący powyżej lub wyszukaj i zainstaluj aplikację „MedM Health” lub „OKOK International” ze sklepu GooglePlay lub AppStore.

3. Rejestracja

Włącz komunikację Bluetooth w smartfonie, otwórz aplikację „MedM Health” lub „OKOK International”, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu telefonu, aby się zarejestrować.

4. Pierwsze ważenie

Przy pierwszym pomiarze dokonywanym z użyciem nowego egzemplarza wagi aplikacja MedM Health lub OKOK International może odczytać jedynie wagę ciała, bez pozostałych elementów składu ciała. Jest to sytuacja normalna, którą nie należy się przejmować.

Przy kolejnych pomiarach wszystkie wybrane parametry będą widoczne.

Przy kolejnych pomiarach wszystkie wybrane parametry będą widoczne.

Waga sprawdza następujące wskaźniki

1. Osiem wskaźników podstawowych



Zawartość tkanki tłuszczowej



Zawartość wody



Zawartość tkanki mięśniowej



Zawartość tkanki kostnej



BMR



Waga



BMI



Zawartość tłuszczu trzewnego

2. Wskaźniki opcjonalne




Białko



Waga bez tkanki tłuszczowej



Wiek biologiczny

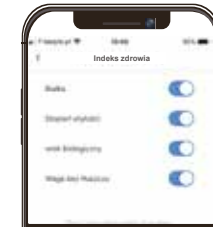

Waga dla 8 użytkowników

Waga wraz z aplikacją może być używana przez 8 użytkowników, którzy mogą korzystać z jednego zarejestrowanego profilu

Docelowa waga

Użytkownicy mogą ustalić i zapisać w aplikacji swoją docelową wagę ciała. Ułatwia to ułożenie planu osiągnięcia tego celu.

Uwaga:

1. Proszę się upewnić, że w czasie pomiaru zachowany zostaje dobry kontakt pomiędzy bosymi stopami, a elektrodami znajdującymi się na powierzchni platformy wagi. W innym przypadku waga zmierzy jedynie masę ciała.
2. Proszę się upewnić, że w czasie pomiaru waga stoi na płaskiej, twardej i równej powierzchni. Proszę unikać ustawiania wagi na dywanach i miękkich powierzchniach.
3. Mokra platforma wagi jest powierzchnią śliską. Upewnij się proszę przed pomiarem, że zarówno platforma wagi oraz Twoje stopy są suche.
4. Waga nie jest wodoodporna. Proszę nie wystawiać jej na działanie wilgoci.
5. Proszę czyścić wagę lekko wilgotną ściereczką. Proszę nie używać żadnych chemicznych ani ściernych substancji.
6. Jeśli waga nie jest używana przez dłuższy czas proszę wyjąć z niej baterie.
7. Waga przeznaczona jest do użytku domowego, w pomieszczeniach zamkniętych.
8. Waga nie służy do zabawy, proszę tak nadzorować dzieci aby nie bawiły się wagą.

Urządzenia kompatybilne

z aplikacją MedM Health:

- Ciśnieniomierz HW-HL001
- Pulsoksymetr napalcowy HW-HL030
- Pulsoksymetr napalcowy HW-HL031
- Termometr bezdotykowy HW-HL020
- Ciśnieniomierz TMA-6 OMEGA BT



dla:

HOME WORLD Piotr Wójcik
Ul. Sarmacka 28B/12
02-972 Warszawa, Polska
www.home-world.pl



www.kardio-test.pl



www.techmed.pl