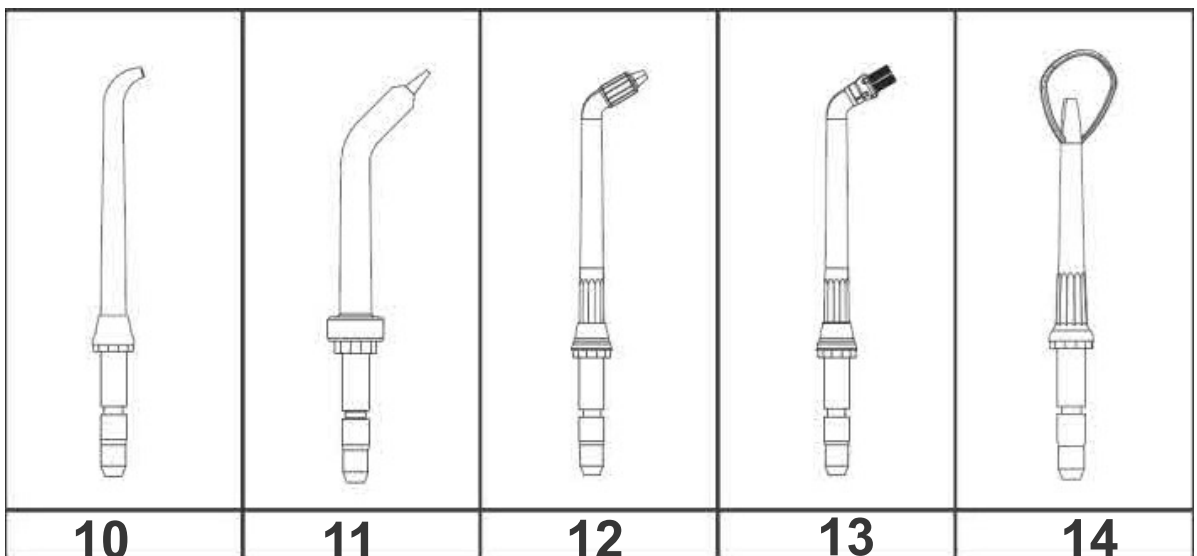
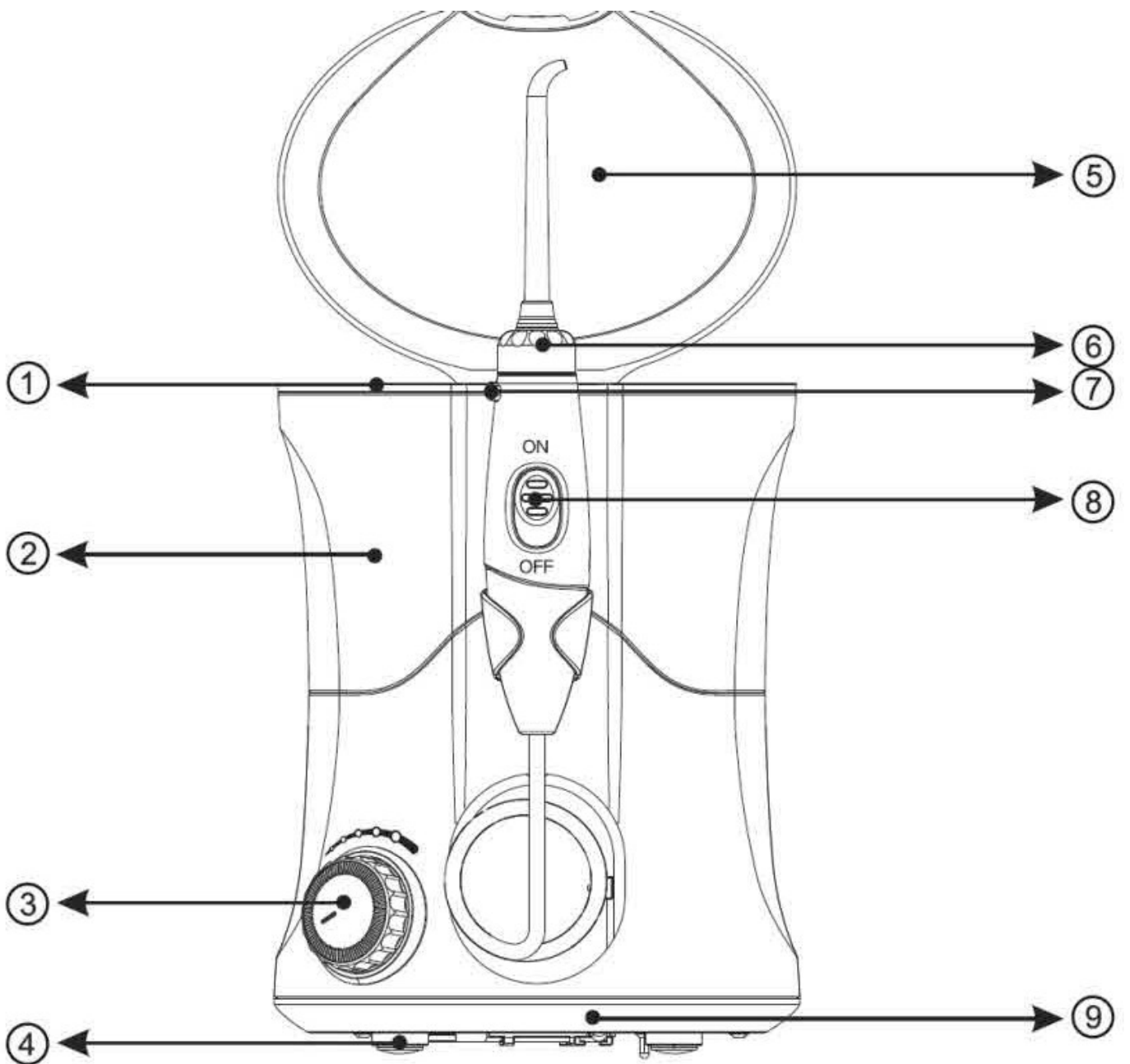

Camry

Premium



CR 2172



KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Adler Sp. z o.o. ul. Ordon 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;

-użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

-uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.

-karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.

-gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul.Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy)

adnotacje serwisu:

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrze, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PROSZĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Warunki gwarancji są różne, jeśli urządzenie jest używane do celów komercyjnych.

1. Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie i zawsze przestrzegaj następujących zasad instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użycia.

2. Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj produktu w żadnym innym celu nie zgodnym z jego zastosowaniem.

3. Stosowane napięcie wynosi 220-240 V, ~ 50 Hz. Ze względów bezpieczeństwa nie jest to właściwe podłączanie wielu urządzeń do jednego gniazda zasilania.

4. Zachowaj ostrożność podczas używania dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się produktem. Nie pozwól dzieciom lub osobom, które nie znają urządzenia, korzystać z niego bez nadzór.

5. **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby, które mają zmniejszone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, lub osoby bez doświadczenia lub znajomość urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za urządzenie bezpieczeństwa lub jeśli zostali poinstruowani o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i są świadomi niebezpieczeństwa związane z jego działaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie a konserwacja urządzenia nie powinna być przeprowadzana przez dzieci, chyba że się one skończyły 8 lat i działania te są prowadzone pod nadzorem.

6. Po zakończeniu korzystania z produktu zawsze pamiętaj, aby delikatnie wyjąć wtyczkę gniazdo zasilania trzymając wylot ręką. Nigdy nie ciągnij za kabel zasilający !!!

7. Nigdy nie wkładaj kabla zasilającego, wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nigdy nie pokazuj produkt do warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednio światło słoneczne lub deszcz itp. Nigdy nie używaj produkt w wilgotnych warunkach.
8. Okresowo sprawdzaj stan kabla zasilającego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, produkt należy zwrócić się do profesjonalnego serwisu, który zostanie wymieniony, aby uniknąć niebezpieczne sytuacje.
9. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym kablem zasilającym lub jeśli został upuszczony lub uszkodzony w inny sposób lub jeśli nie działa prawidłowo. Nie próbuj naprawiać uszkodzonego produktu sam, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem. Zawsze zamieniaj uszkodzone urządzenie na profesjonalna lokalizacja serwisowa w celu jej naprawy. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowani serwisanci. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować niebezpieczne sytuacje dla użytkownika.
10. Nigdy nie wkładaj produktu na gorące lub ciepłe powierzchnie lub urządzenia kuchenne jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy.
11. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Nie pozwól, aby przewód zwisał na krawędzi licznika lub dotykaj gorących powierzchni.
13. Nigdy nie zostawiaj produktu podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru. Nawet kiedy użycie jest przerywane na krótki czas, wyłączone z sieci, odłącz zasilanie.
14. Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie aktualnych pozostałości urządzenie (RCD) w obwodzie zasilania, z prądem różnicowym nie większym niż 30 mA. Skontaktuj się z profesjonalnym elektrykiem w tej sprawie
15. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby nie wpadło do wody ani nie spadło na podłogę. Wtyczka powinna być zawsze dostępna.

16. Okresowo sprawdzaj, czy przewód nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest uszkodzony, zanieś jednostkę ładującą do centrum serwisowego.
17. Uszkodzona lub niedziałająca jednostka nie powinna być dłużej używana.
18. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
19. Szczoteczka do zębów nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Dzieci w wieku od 3 lat i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy mogą korzystać ze szczoteczki do zębów, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia związanych z tym zagrożeń.
20. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.
21. Irygator doustny nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieć związane z tym zagrożenia.
22. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
23. Urządzenie należy stosować wyłącznie z płynami zdefiniowanymi w instrukcjach producenta.
24. Użyj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Nie należy używać przystawek ani ładowarek, które nie są zalecane przez producenta.
25. Jeśli produkt zostanie upuszczony, główkę szczoteczki / irygatora należy wymienić przed następnym użyciem, nawet jeśli nie są widoczne żadne uszkodzenia.
26. Wymień główkę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli głowica szczotkowa się zużyje.
27. Małe części mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.
28. Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie lub płynie lub przechowywać w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
29. Nie używać jak urządzenie jest mokre. Odłącz natychmiast.

30. Nie otwieraj i nie demontuj urządzenia. W celu recyklingu baterii należy wyrzucić całe urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

31. Otwarcie urządzenia zniszczy urządzenie i spowoduje unieważnienie gwarancji.

32. Podczas odłączania zawsze trzymaj wtyczkę zasilania zamiast przewodu.

33. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.

34. Jeśli poddajesz się leczeniu w jakimkolwiek stanie higieny jamy ustnej, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem dentystą.

35. Niniejsze urządzenie jest urządzeniem do pielęgnacji ciała i nie jest przeznaczone do użytku u wielu pacjentów w gabinecie stomatologicznym lub instytucji.

36. Nie kieruj wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych miejsc. Ten produkt może wytwarzać ciśnienia, które mogą spowodować poważne uszkodzenia w tych obszarach.

37. Nie kieruj wody do nosa lub ucha. Potencjalnie śmiertelna ameba, *Naegleria fowleri*, może być obecna w pewnej ilości wody z kranu lub nie chlorowanej wody ze studni i może być śmiertelny, jeśli zostanie skierowany do tych obszarów.

Opis urządzenia:

1. Końcówka
2. Zbiornik
3. Wł. / Wył.
4. Szczotka
5. Pokrywa zbiornika
6. Obrotowa końcówka 360 °
7. Pokrętło Tip-Up
- 8 .. Przycisk pauzy
9. Przyssawki
10. Końcówka wysokiego ciśnienia
11. Końcówka przyzębia
12. Końcówka ortodontyczna
13. Końcówka do płytki nazębnej
14. Końcówka do czyszczenia języka

Przygotowanie zbiornika

Zdejmij pokrywę (5) z podstawy i napełnij zbiornik letnią wodą. Włóż zbiornik do podstawy i dociśnij, a następnie załóż pokrywę.

Wstawianie i usuwanie końcówek:

Włóż końcówkę do środka pokrętła w górnej części rękojeści dyszy dentystycznej, kolorowy pierścień podniesie się i wyda dźwięk kliknięcia sygnalizujący, że końcówka jest prawidłowo zablokowana na miejscu. Aby wyjąć końcówkę z uchwytu, naciśnij przycisk wysuwania końcówki dyszy (7) po lewej stronie pierścienia i wyciągnij końcówkę z uchwytu.

Regulacja ustawień ciśnienia

Chwyć pokrętło naciskowe (3) delikatnie i obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powinieneś usłyszeć kliknięcie i urządzenie powinno się uruchomić. Następnie obróć go swobodnie w prawo, aby zwiększyć i

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć ciśnienie. Maszyna zatrzyma się automatycznie po 3 minutach, jeśli nie zostanie użyta. Jeśli chcesz go ponownie użyć, włącz go i wyłącz ponownie.

Używanie doustnego irigatora:

Oprzyj się nisko nad zlewem i umieść końcówkę dyszy w ustach. Wyceluj końcówką w kierunku zębów. Wolną ręką włącz urządzenie. Ustaw ciśnienie na żądane ustawienie. Skieruj strumień, obracając pokrętkę (6), aby ustawić kąt. Przekręć przycisk pauzy (8) do pozycji ON.

Zalecana technika

Kieruj strumień wody pod kątem 90 stopni do linii dziąseł, lekko zamknij usta, aby uniknąć rozpryskiwania, ale pozwól wodzie swobodnie płynąć z ust do zlewu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zacznij w obszarze trzonowym (zęby tylne) pracując w kierunku zębów przednich. Zsuń końcówkę dyszy wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę między zębami. Kontynuuj proces, aż wszystkie obszary wokół i między zębami zostaną oczyszczone.

Gdy zakończysz pracę z urządzeniem

Wyłącz urządzenie i usuń wszelkie płyny pozostałe w zbiorniku. Odłącz urządzenie.

Specjalne wskazówki:

11. Końcówka przyzębia: Końcówka dostarczyła wodę lub roztwór antybakteryjny głęboko do kieszonek przyzębia.

Aby użyć końcówki pochyl się nisko nad zlewem i umieść miękką końcówkę na zębie pod kątem 45 stopni i delikatnie umieść końcówkę pod linią dziąseł. Obróć urządzenie do najniższego ustawienia ciśnienia, a następnie wyczyść delikatnie wzdłuż linii dziąseł.

12. Końcówka ortodontyczna

Specjalna końcówka jest specjalnie zaprojektowana do jednoczesnego szczotkowania i płukania trudno dostępnych miejsc wokół aparatów ortodontycznych i innych protez dentystycznych.

Aby go użyć chudego nisko nad zlewem i użyj szczeciny szczotki do czyszczenia wokół aparatu dentystycznego. Woda przepłynie przez szczotkę i splucze wszelkie pozostałości, które się usuwa.

14. Czyszczenie języka

Oprzyj się o umywalkę, umieść na języku końcówkę do czyszczenia języka i uruchom urządzenie przy użyciu najniższego ustawienia ciśnienia i powoli zwiększaj moc. Delikatnie umieść końcówkę do czyszczenia języka na środku / linii środkowej języka zaczynając od połowy idąc ku czubkowi języka i z lekkim naciskiem pociągnij do przodu.

Czyszczenie

Po użyciu jakiegokolwiek specjalnego roztworu w zbiorniku należy chwilę przepłukać urządzenie.

Częściowo napełnij zbiornik ciepłą wodą z kranu, skieruj końcówkę dyszy do zlewu i włącz opróżnianie zbiornika. Pomoże to zapobiec zatykaniu się końcówki i pomoże Twojej jednostce przetrwać dłużej.

Urządzenia należy czyścić tylko miękką, nieścierną szmatką. Nie używaj żadnych chemikaliów ściernych.

Dane techniczne:

Źródło zasilania: 220-240 V 50/60 Hz

Moc: 18W

Moc maks .: 30 W

ADLER

EUROPE



Electric Kettle



Burr Coffee



Milk Frother



Sandwich



TOASTER 2



ELECTRIC



CITRUS



PERSONAL BLENDER



FOOD



MIXER



AIR FRYER



PASTEURIZATIO



AIR CONDITIONER



AIR HUMIDIFIER



**FAN HEATER
AD 7725**



KITCHEN SCALE



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kviitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótalkatrészeket szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Dacă doriți să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delovi ili da podnesete kakvi bilo poplaki, kontaktirajte direktno sa prodavacot koj ja izdal сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desiđeri acqđistare pezzđi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill kōpa reservdelar eller gōra nāgra reklamationer, vānligēn kontakta sālĳaren som utfārdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ōnsker at kōbe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sālĳeren, som har udstēdt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	أو غير قطعءارش في ترغب كنتاذ! شكوىأي تقديم، لاصتاءا فيرجى مباشرءلاصيا! رءصاً يذلاءا بالباءع
BG	Ako iskate da zakupite rezervni delovi ili da napravite oplakvanija, molja, svържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.