

名称: W1-27国说明书-波兰语

尺寸: 134x232mm

材质: 60g书纸

印刷: 单色双面印刷

装订方式: 胶装

公差: ±1mm

Go the extra smile



Dziękujemy za wybór inteligentnego irygatora jamy ustnej OcClean W1.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ten produkt może być używany tylko ze specjalną dyszą OcClean. OcClean nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z urządzenia wraz z akcesoriami innych firm. Aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody w kierunku oczu, nosa, uszu lub gardła w celu spowodowania przypadkowych obrażeń, NIE używać do celów innych niż czyszczenie jamy ustnej. Osobom, które właśnie przeszły zabieg chirurgii jamy ustnej w celu leczenia oraz tym, które cierpią na choroby jamy ustnej, takie jak poważnie krwawiące dziąsła, przed użyciem tego produktu zaleca się konsultację ze stomatologiem. To normalne, że przy pierwszym użyciu produktu od czuwał lekkiego dyskomfortu lub krwawienie z dziąsła, ponieważ dziąsła stają się zdrowsze, a objawy ustępują. W przypadku dużej ilości krwawienia lub utrzymującego się krwawienia po 3-4 tygodniach stosowania zaleca się zaprzestanie stosowania i skonsultowanie się z dentystą przed użyciem. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poddane nadzorowi lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych przypadkowym wdychaniem przez dzieci lub niemowlęta, ten produkt jest zalecany tylko dla osób powyżej 12 roku życia. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.



Instrukcje




Instrukcje dot. szczotkowania

Co jakiś czas umieszczaj dyszę blisko szczeliny między zębami. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby rozpocząć czyszczenie. Powoli przesuwaj się wzdłuż linii dziąsła do następnej strefy, powtórz czyszczenie dla wszystkich szczelin.



* Zachowaj kąt 90° między dyszą a szczeliną między zębami, aby zachować lepszy efekt czyszczenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

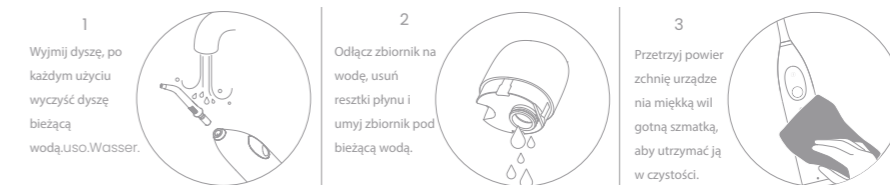

Ważne wskazówki

To normalne, że przez kilka pierwszych szczotkowań może ulatniać się tylko gaz, który stanie się mieszaniną powietrza i wody, gdy woda dotrze do dyszy.
NIE zanurzaj obudowy urządzenia w wodzie, używaj suchej szmatki do czyszczenia po użyciu.
Jeśli urządzenie będzie długo przechowywane na półce, opróżnij zbiornik wody do wyschnięcia.
Zaleca się korzystanie z funkcji spryskiwania w celu usunięcia pozostałej wody. Czyść i przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu.
NIE wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
To normalne, że urządzenie trochę się nagrzewa podczas czyszczenia.
To normalne, że po pierwszych kilku użyciach zbiornika po czyszczeniu wyczuwalny jest zapach plastiku, który zniknie po kilkunastu użyciach.
Opróżnij zbiornik na wodę i wytrzyj go do sucha przed włożeniem do etui podręcznego.
musi być dostarczony tylko w SELV.
Urządzenie zawiera baterie, które są niewymienne.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Inteligentny Irygator Jamy Ustnej OcClean W1
Model	OcClean W1
Pojemność zbiornika na wodę	30ml
Poziom wodoszczelności	IPX5
Moc Wejściowa	2,5 W
Ładowanie	Ładowanie indukcyjne
Wejście	5V --- 0.5A
Okres żywotności baterii*	30 dni
Pojemność baterii	1200 mAh
Czas Ładowania	3 godziny

* Uwagi: Żywotność baterii jest obliczana na podstawie domyślnego trybu pracy raz/dzień, 1 zbiornik/czas.

Inne wskazówki

● Zaleca się wymianę dyszy co 4-6 miesięcy. Jeśli dysza jest poważnie zablokowana lub nie może być normalnie i szczelnie zamontowana na korpusie urządzenia, również należy ją natychmiast wymienić.