

Fairywill


Soniczna szczoteczka
do zębów
2001

Dziękujemy za wybór sonicznej szczoteczki do zębów Fairywill 2001. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

1. Opis produktu

- Częstotliwość wibracji: 38 000 razy na minutę.
- Zawiera 3 tryby (low, high and massage).
- Posiada właściwości antypoślizgowe oraz ergonomiczny kształt.
- Wodoodporność na poziomie IPX7.
- Akumulator NI-MH zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a jego pełne naładowanie umożliwia działanie produktu do 21 dni. Szczoteczka posiada wskaźnik niskiego poziomu akumulatora. W zestawie znajduje się przewód USB przeznaczony do ładowania produktu.
- Inteligentny timer będzie przypominał co 30 sekund o konieczności zmiany czyszczenia strefy jamy ustnej.
- Szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach, aby zachować dokładny czas szczotkowania.

2. Budowa produktu

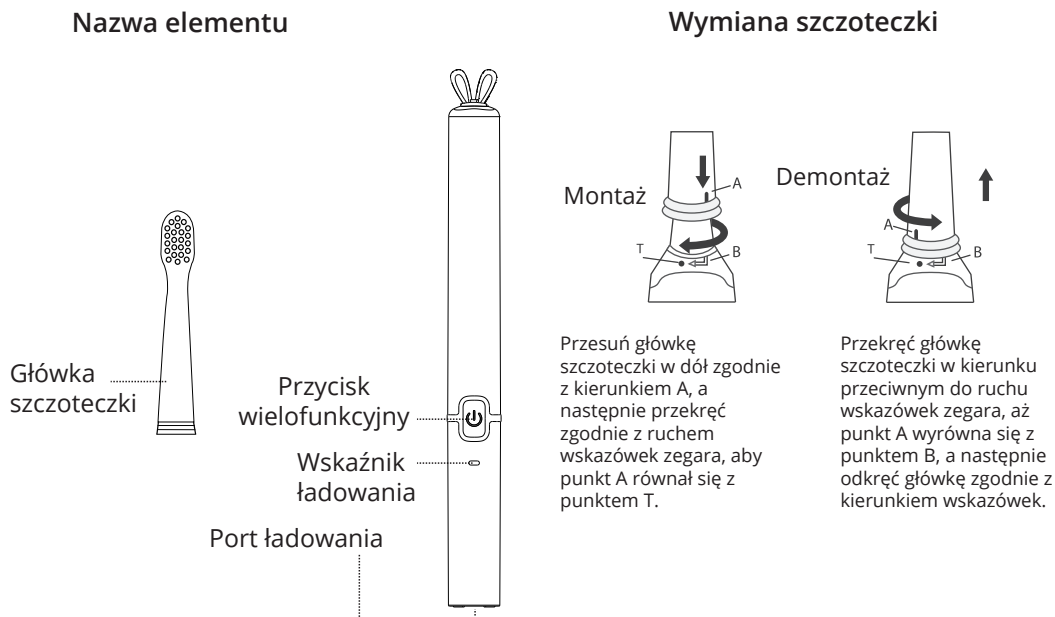

3. Ważne zabezpieczenia

- Podczas pierwszego użytkowania szczoteczki do zębów, możliwe jest odczuwanie drętwienia. Jest to normalne u osób używających szczoteczki po raz pierwszy. Uczucie to powinno zniknąć po kilku użyciach.
- Nie należy otwierać, naprawiać ani modyfikować produktu bez zasięgnięcia fachowej pomocy.
- Nie należy uderzać ani upuszczać produktu. Jeżeli produkt jest uszkodzony, należy zaprzestać jego używania.
- Przed ładowaniem, należy sprawdzić, czy produkt jest zgodny z lokalnym napięciem.
- Do tego produktu pasują tylko niektóre główki szczoteczek do zębów.
- Przed użyciem skonsultuj się z dentystą, jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy poddałeś się zabiegowi chirurgicznemu w okolicy dziąseł lub w jamie ustnej.
- W przypadku wystąpienia krwawienia po użyciu szczoteczki lub jeśli krwawienie trwa dłużej niż tydzień, należy niezwłocznie skonsultować się z dentystą.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka.
- Dzieci powinny być nadzorowane podczas używania szczoteczki, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Należy trzymać szczoteczkę z dala od dzieci, gdy nie jest używana.
- Nie należy wystawiać szczoteczki na działanie wysokiej temperatury lub promieni słonecznych.

4. Specyfikacja

Temperatura robocza: 0-50 C

Napięcie robocze: DC1.2V

Materiał włosia: Nylon

Napięcie wejściowe: DCS.OV

Moc wejściowa: 0,6W

Moc robocza: O.SSW

Czas ładowania: Do 6 godzin

5. Prawidłowe użytkowanie

- Podłącz produkt do źródła zasilania za pomocą kabla USB i naładuj produkt.
- Zamocuj główkę szczoteczki do uchwyty i upewnij się, że jest ona zablokowana we właściwym miejscu. Zwilż włosie szczoteczki i nałóż pastę do zębów.
- Delikatnie przyłóż główkę szczoteczki do zębów.
- Delikatnie przesuwać główkę szczoteczki po zębach, szczotkując przednie i tylne powierzchnie oraz dziąsła przez 10 sekund.
- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć szczoteczkę i wyszczotkować każdą strefę jamy ustnej.

- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zmienić tryb pracy szczoteczki:
 - Low: Do łagodniejszego czyszczenia zębów, jamy ustnej i miejsc wrażliwych (wskaźnik w kolorze zielonym).
 - High: Do skutecznego czyszczenia zębów (wskaźnik w kolorze czerwonym).
 - Massage: Do delikatnej stymulacji, w celu utrzymania zdrowych dziąseł (wskaźnik w kolorze niebieskim).
- Przesuń szczoteczkę do następnego obszaru, gdy timer przypomni o przerwie co 30 sekund. Po zakończeniu pracy na wszystkich 4 obszarach, szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach.

6. Ładowanie produktu

- Gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski, wskaźnik ładowania zaświeci się 10 razy.
- Podczas ładowania wskaźnik pozostanie czerwony. Po całkowitym naładowaniu, wskaźnik zmieni kolor na zielony. Gdy szczoteczka jest już w pełni naładowana, ładowarka wyłączy się, aby zapobiec przeładowaniu.
- W przypadku pierwszego użycia lub jeśli akumulator będzie rozładowany przez dłuższy czas, normalnym jest, że wskaźnik może nie świecić przez pierwsze 5 minut.

Wyprodukowane w Chinach

Dystrybucja:

Zhuhai Zonghengyupin Kuajingdianshang Youxiangongsi, Zhuhai, Guangdong,
519031, CN