

# Fairywill

Soniczna szczoteczka  
do zębów  
P11

Instrukcja obsługi


Dziękujemy za wybór sonicznej szczoteczki do zębów Fairywill P11. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

## 1. Opis produktu

- Wodoodporna i antypoślizgowa konstrukcja.
- Szczoteczka posiada wymienne główki.
- Wibracje o wysokiej częstotliwości zapewniają 62 000 ruchów szczoteczki w każdym cyklu\*, skutecznie usuwając płytkę nazębną, zapobiegając zapaleniu dziąseł oraz dogłębnie oczyszczają jamę ustną.
- W zestawie znajduje się przewód USB przeznaczony do ładowania produktu.
- Szczoteczka posiada funkcję przypominającą o niskiej mocy akumulatora. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik będzie migać powoli lub szczoteczka się nie włączy.
- Inteligentny timer będzie przypominał co 30 sekund o konieczności zmiany czyszczenia strefy jamy ustnej.
- Dostępne są 3 tryby: Clean, Soft i White. W szczoteczkę wbudowana jest również funkcja pamięci trybów, co oznacza, że po włączeniu szczoteczki domyślny tryb początkowy pozostaje taki sam, jak tryb ustawiony w momencie ostatniego wyłączenia szczoteczki.

## 2. Budowa produktu

- ① Głowica szczoteczki
- ② Przycisk zasilania/przycisk trybu pracy
- ③ Wskaźnik funkcji (trybu)/zasilania/ładowania
- ④ Uchwyt
- ⑤ Port ładowania

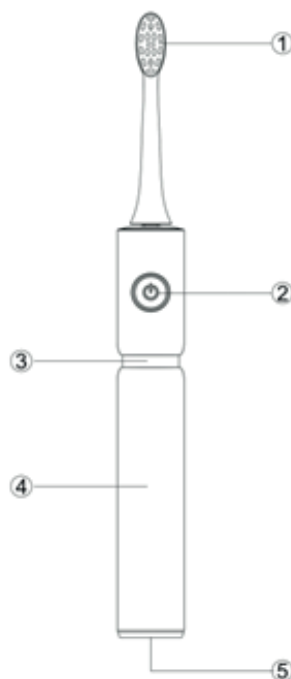

### 3. Działanie produktu

#### Użytkowanie

- Przesuń główkę szczoteczki w dół do uchwytu i upewnij się, że jest zablokowana we właściwej pozycji.
- Włącz szczoteczkę do zębów, naciskając przycisk zasilania.
- Aby przełączyć tryb ("Clean", "Soft" i "White"), naciśnij kilkakrotnie przycisk zasilania.
- Zmocz włosie i nałóż na szczoteczkę odpowiednią ilość pasty do zębów.
- Umieść włosie z pastą przy zębach pod lekkim kątem, w kierunku linii dziąseł.
- Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach z przodu, z tyłu i po dziąsłach. Szczoteczka powinna przesuwać się po zębach przy minimalnym nacisku. Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na zęby/dziąsła, ani też przykładać włosia do jednego obszaru jamy ustnej przez dłuższy czas.
- Szczoteczka posiada 2-minutowy, inteligentny timer. Dwie minuty to zalecany przez dentystów, optymalny czas czyszczenia zębów. Po każdych 30 sekundach następuje przerwa, która przypomina o konieczności przejścia do innej strefy jamy ustnej.
- Przejdź do następnej strefy, gdy nastąpi przerwa. Szczoteczka automatycznie wyłączy się po 2 minutach.
- Aby uniknąć plam z pasty do zębów, włącz szczoteczkę dopiero po przyłożeniu jej do zębów i wyjmij ją z ust dopiero po wyłączeniu.

#### Wymiana główki szczoteczki

Montaż: Wsuń główkę szczoteczki w dół do uchwytu. Upewnij się, że znajduje się ona we właściwej pozycji.

Demontaż: Wyciągnij główkę szczoteczki z uchwytu.

#### Ładowanie produktu

- Jeśli po pierwszym uruchomieniu szczoteczka posiada niski poziom akumulatora, naładuj urządzenie do pełna.
- Jeśli szczoteczka nie jest używana przez ponad 3 miesiące, przed użyciem należy ją w pełni naładować, zgodnie z instrukcją ładowania.
- Jeśli wskaźnik ładowania miga powoli podczas pracy, oznacza to, że szczoteczka posiada niski poziom akumulatora.
- Aby naładować szczoteczkę, włóż kabel USB do portu ładowania w dolnej części szczoteczki i upewnij się, że jest bezpiecznie podłączony do zasilania elektrycznego.

- Wskaźnik ładowania w kolorze białym będzie migać powoli podczas procesu ładowania. Kiedy akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik będzie świecił przez dwie minuty, a po 2 minutach wyłączy się automatycznie. Po pełnym naładowaniu szczoteczki, można jej używać dwa razy dziennie (po 2 minuty) przez 30 dni.
- Szczoteczka posiada funkcję wodoodporności, dzięki czemu można jej bezpiecznie używać w łazience.

## Tryby pracy

### Tryb Clean

W tym trybie szczoteczka wykonuje około 62 000 ruchów w każdym cyklu\*. Zaświecą się trzy wskaźniki w kolorze białym, ruchy szczoteczki będą szybkie, a poziom intensywności drgań się podniesie. Tryb jest odpowiedni dla prawidłowej i zdrowej jamy ustnej oraz oferuje najsilniejszy efekt czyszczenia.

### Tryb Soft

W tym trybie szczoteczka wykonuje około 56 000 ruchów w każdym cyklu\*. Zaświeci się tylko jeden, biały wskaźnik. Ruch szczoteczki jest delikatny, a intensywność drgań najmniejsza z wszystkich trybów. Tryb Soft jest odpowiedni dla użytkowników o wrażliwych zębach.

### Tryb White

W tym trybie szczoteczka wykonuje od 56 000 do 62 000 ruchów w każdym cyklu\*. Zaświecą się dwa wskaźniki w kolorze białym, a ruchy szczoteczki i intensywność wibracji będą się gwałtownie zmieniać. Tryb przeznaczony do delikatnej pielęgnacji, w celu utrzymania zdrowych dziąseł.

\*Cykl szczotkowania trwający 2 minuty jest zalecany przez dentystów.

## 4. Specyfikacja

Temperatura pracy: 0-50°C

Napięcie robocze: DC 3.7 V

Materiał włosia: Nylon

Napięcie wejściowe: DC 5.0 V

Moc znamionowa: 0.7-1.8 W

Czas ładowania: około 2 godzin

Wodoodporność: IPX7

## 5. Środki ostrożności

- Nie należy demontować, naprawiać ani zmieniać produktu bez upoważnienia.
- Osoby z poważnymi chorobami jamy ustnej lub po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci, niemowlęta i osoby niezdolne do obsługi urządzenia powinny być nadzorowane przez rodzica lub osobę dorosłą.
- Nie należy moczyć produktu w wodzie przez dłuższy czas.
- Nie należy umieszczać szczoteczki w wysokiej temperaturze ani wystawiać jej na działanie promieni słonecznych.
- Nie należy mocno dociskać włosia do zębów lub dziąseł.
- Produkt nie jest przystosowany do użytku przez dzieci poniżej 12 roku życia.

# Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.