


PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Rękojeść szczoteczki do zębów Sonic Niceboy ION
2. 3x końcówka szczoteczki (mięka, średnia, twarda)
3. Bezprzewodowa stacja dokująca
4. Kabel do ładowania micro USB

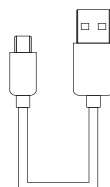


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przy pierwszym użyciu włożyć szczoteczkę do bezprzewodowej stacji dokującej.
Proces ładowania:
 - 0%–10% – wskaźnik ładowania świeci się nieprzerwanie na czerwono
 - 10–100% – wskaźnik ładowania świeci się nieprzerwanie na pomarańczowo
 - Ładowanie zakończono – wskaźnik ładowania świeci się nieprzerwanie na zielonoUwaga:
 - Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, podczas ładowania elektrycznej szczoteczki do zębów wskaźnik ładowania może się nie świecić. Stan ładowania będzie widoczny dopiero po odczekaniu 3–5 minut.
2. Założyć nową końcówkę szczoteczki, jak pokazano na rysunku. Jeśli trzeba końcówkę zdjąć, wystarczy ją ściągnąć w sposób pokazany na rysunku.



3. Zwilżyć włosie wodą i wycisnąć odpowiednią ilość pasty do zębów. Dotknąć włosiem z nałożoną pastą do powierzchni zębów w dowolnym miejscu jamy ustnej.


4. Nacisnąć włącznik i lekko poruszać szczęką w górę i w dół, tak aby umożliwić czyszczenie zębów poprzecznie od zewnętrznej i wewnętrznej strony. Jamę ustną dzielimy na cztery części. Zalecany czas czyszczenia każdej z części wynosi około 30 sekund. Po zakończeniu czyszczenia danej części przez 30 sekund szczoteczka elektryczna do zębów zatrzyma się na chwilę, aby przypomnieć o przejściu do kolejnej części.

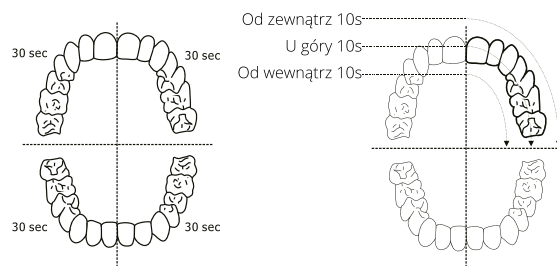


5. Za pomocą przycisku przełączania trybu pracy na rękojeści można przełączać tryby zgodnie z preferencjami użytkownika.

Uwaga:

- 1: Domyślnie aktywowany jest tryb Sensitive
- 2: Tryb przełączania: w ciągu 5 sekund po otwarciu krótko nacisnąć przycisk przełączania trybu pracy i wybrać odpowiedni tryb;
- 3: Tryb automatycznego zapamiętywania: w systemie rejestrowany jest dowolny tryb używany przez czas dłuższy niż 5 sekund. Tryb zapamiętywania aktywuje się domyślnie przy kolejnym włączeniu.

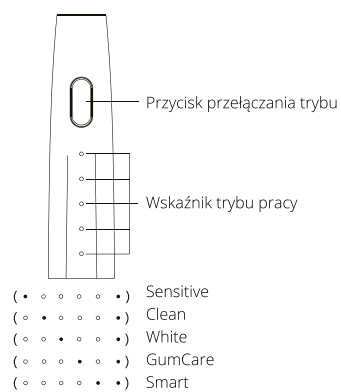

6. Po upływie określonego przez specjalistów czasu czyszczenia zębów wynoszącego 2 minuty szczoteczka elektryczna automatycznie się zatrzymuje. Po umyciu zębów wypłukać końcówkę szczoteczki pod bieżącą wodą oraz strząsnąć nadmiar wody z końcówki i rękojeści szczoteczki.

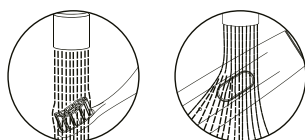

Uwaga:

- 1: Aby zatrzymać elektryczną szczoteczkę do zębów w trakcie czyszczenia jamy ustnej, po włączeniu szczoteczki na 5 sekund krótko nacisnąć przycisk.
- 2: Jeśli szczoteczka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłączyć wtyczkę do ładowania i dokładnie wyczyścić końcówkę oraz rękojeść szczoteczki, a następnie przechować w chłodnym i suchym miejscu;
- 3: Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki do zębów co 60 dni.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować do wglądu w przyszłości.
- Podłączoną do prądu podstawę do ładowania należy trzymać z dala od wody. Nie umieszczać ani nie przechowywać nad wodą w wannie, umywalce itd. lub w jej sąsiedztwie. Nie wolno zanurzać podstawy do ładowania w wodzie ani innej cieczy. Po wyczyszczeniu upewnić się przed podłączeniem do sieci elektrycznej, że podstawa do ładowania jest całkowicie sucha.
- Przed podłączeniem urządzenia należy skontrolować, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej.
- Nigdy nie używać podstawy do ładowania, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Jeśli uszkodzeniu uległ kabel podstawy do ładowania lub jest uszkodzona wtyczka, należy zawsze wymienić je na nowe, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeśli urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone (końcówka szczoteczki lub rękojeść), należy zaprzestać jego użytkowania. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy się zwrócić do centrum obsługi konsumenta w danym kraju.
- Nie wolno używać podstawy do ładowania na zewnątrz lub w pobliżu rozgrzanych powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej bądź niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, o ile nie znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały pouczone o sposobie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Szczoteczki do zębów nie należy używać w wannie ani pod prysznicem.
- W razie przebytej w ciągu ostatnich 2 miesięcy operacji dziąseł lub jamy ustnej przed użyciem szczoteczki należy skonsultować się z dentystą.
- Należy skonsultować się z dentystą także wtedy, gdy po użyciu tej szczoteczki wystąpi nadmierne krwawienie lub jeśli krwawienie utrzymuje się po 1 tygodniu jej stosowania.
- Szczoteczka do zębów Niceboy ION Sonic spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektromagnetycznych. W przypadku posiadania rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia przed użyciem szczoteczki Niceboy ION Sonic należy skonsultować się z lekarzem lub producentem wszczepionego urządzenia.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie należy go używać do żadnych innych celów. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu lub bólu należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lekarzem.
- W razie problemów zdrowotnych przed użyciem urządzenia Niceboy ION Sonic należy skonsultować się z lekarzem. - Szczoteczka do zębów Niceboy ION Sonic jest urządzeniem do pielęgnacji osobistej. Nie jest przeznaczona do stosowania u wielu pacjentów w gabinecie lub placówce stomatologicznej.
- Nie używać końcówki szczoteczki z połamanym lub wygiętym włosiem. Wymieniać końcówkę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.
- Nie należy myć końcówek szczoteczki w zmywarce do naczyń.
- Nie należy używać końcówek szczoteczki innych niż zalecane przez producenta.
- Nadzorować dzieci podczas mycia zębów, dopóki nie nabiorą właściwych nawyków szczotkowania.
- Jeżeli pasta do zębów zawiera nadtlenek, sodę oczyszczoną lub wodorowęglan (często spotykane w wybielających pastach do zębów), po każdym użyciu dokładnie wyczyścić końcówkę szczoteczki wodą z mydłem. Zapobiegnie to ewentualnemu popękaniu tworzywa sztucznego.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

1. Zeskanować kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub wyszukać „Niceboy ION” w sklepie z aplikacjami mobilnymi i pobrać aplikację.
2. Otworzyć aplikację „Niceboy ION” i zarejestrować nowe konto lub użyć dotychczasowego.
3. Po ustawieniu hasła przejść do kolejnego kroku „Dodanie urządzenia”.
4. Włączyć Bluetooth (przy odpowiedniej sile sygnału i odległości zostanie znalezione znajdujące się w pobliżu urządzenie Niceboy ION Smart- Sonic) i wybrać opcję „Dodaj”.
5. Kliknąć przycisk „+”
6. Poczekać na „podłączenie”
7. Nastąpiło dodanie urządzenia i pojawi się komunikat „gotowe”
8. Szczoteczka do zębów została poprawnie podłączona. Szczoteczka do zębów będzie wibrować i będzie migać pięć białych lampek na znak, że łączenie z siecią Bluetooth przebiegło poprawnie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

| | |
|------------------------------|--|
| Liczba obrotów: | 43 000 |
| Napięcie / moc: | 3,7 V == 1,85 W |
| Ładowanie: | Bezprzewodowa stacja do ładowania |
| Napięcie wyjściowe: | 5 V == 85 mA |
| Czas pracy: | 20 dni (obliczony według schematu użytkowania 2 minuty/1 raz i 2 razy/dzień) |
| Pojemność baterii: | 800 mAh |
| Czas ładowania: | 8–10 godzin |
| Wodoszczelność: | IPX7 |
| Moc częstotliwości radiowej: | ≤ 2,5mW |
| Bluetooth: | 5.0 (2,4 GHz) |

Żywotność baterii lub akumulatora, które mogą być dołączone do produktu, wynosi sześć miesięcy, ponieważ jest to materiał eksploatacyjny. Niewłaściwa obsługa (długotrwałe ładowanie, zwarcie, uszkodzenie przez inny przedmiot itp.) może prowadzić na przykład do pożaru, przegrzania lub wycieku baterii.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

- Poniższe często zadawane pytania pomogą w efektywnym korzystaniu z serwisu gwarancyjnego.
 - Aby zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych wydatków, przed skontaktowaniem się ze specjalistycznym serwisem posprzedażowym należy przeprowadzić poniższą prostą kontrolę.
1. Siła poruszania się jest zmniejszona
 - Sprawdzić, czy szczoteczka jest mocno dociśnięta do zębów.
 - Sprawdzić, czy szczelina między końcówką szczoteczki a korpusem nie jest zbyt duża lub zbyt ciasna.
 - **Rozwiązanie:**
 - Delikatnie przyłożyć końcówkę szczoteczki do zębów.
 - Zdjąć końcówkę szczoteczki z ramienia i ponownie zamocować ją na trzpieniu napędowym, zachowując odpowiednią odległość między końcówką a rękojeścią.
 2. Szczoteczka do zębów działa tylko przez krótki czas.
 - Sprawdzić, czy podstawa do ładowania styka się odpowiednio ze złączem ładowania w dolnej części korpusu i czy wskaźnik ładowania świeci się na czerwono.
 - Sprawdzić, czy może zasilanie jest niewystarczające.
 - **Rozwiązanie:**
 - Wyczyścić wejście USB 1/0
 - Bateria jest na wyczerpaniu.
 3. Szczoteczka do zębów nie działa
 - Ustawić korpus szczoteczki do zębów pionowo w ładowarce, w miejscu, w którym jest on podłączany do podstawy do ładowania, i sprawdzić, czy świeci się czerwona lampka kontrolna.
 - **Rozwiązanie:**
 - Naładować szczoteczkę.
 - Wymienić baterię w autoryzowanym centrum obsługi klienta Niceboy.

Podrecznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NICEBOY ION SMARTSONIC jest zgodny z dyrektywami: 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełna treść Deklaracji Zgodności UE jest do dyspozycji na stronie internetowej: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnc>.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produkt należy oddać do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, które przyjmą go bezpłatnie. Właściwa utylizacja produktu pomoże w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(sprzęt użytkowany przez firmy i przedsiębiorstwa).

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o sposobach utylizacji produktu i wskażą, kto ma obowiązek finansowania utylizacji tego sprzętu elektrycznego w zależności od daty wprowadzenia go na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej. Wyżej przedstawiony symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć szczegółowych informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.