


waterpik®

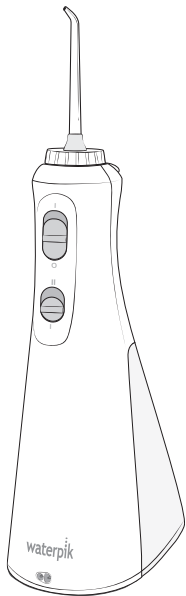

Waterpik® Water Flosser Model WP-490

Irygator bezprzewodowy

www.waterpik.pl

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ
WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego.

Podczas korzystania z produktów elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Nie należy obsługiwać ładowarki *USB mokrymi rękami.
- Nie należy umieszczać ani upuszczać ładowarki *USB do wody lub innych płynów.
- Nie używać produktu podczas kąpieli.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w miejscach, w których może on spaść lub zostać wciągnięty do wanny lub zlewu.
- Nie należy sięgać po produkt, jeśli wpadł do wody. Należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.

**Ładowarka USB nie jest dołączona do wszystkich konfiguracji produktu.*

- Przed pierwszym użyciem i w trakcie użytkowania produktu należy sprawdzić przewód ładujący i ładowarkę *USB pod kątem uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją lub zaleceniami lekarza dentyści.
- Należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki USB. Jeśli ładowarka USB nie została dostarczona, do ładowania tego produktu wymagana jest dostarczona przez użytkownika ładowarka USB o następujących parametrach: USB Typ-A, Wyjście znamionowe: 5.0 VDC, 1.0 A.
- Nie wolno podłączać urządzenia do sieci o napięciu innym niż podane na urządzeniu lub ładowarce.
- Przewód ładujący i ładowarkę *USB należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia Waterpik dłużej niż 5 minut w ciągu dwóch godzin.
- Nie należy kierować wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych miejsc. Ten produkt jest w stanie wytworzyć ciśnienie, które może spowodować poważne uszkodzenia w tych obszarach.


- Jeśli lekarz zalecił premedykację antybiotykową przed zabiegami stomatologicznymi, należy skonsultować się ze stomatologiem przed użyciem tego produktu lub jakiegokolwiek innego środka do higieny jamy ustnej.
- Zbiornik należy napełniać wyłącznie ciepłą wodą lub innymi roztworami zalecanymi przez stomatologów.
- Nie używaj jodu, soli fizjologicznej (roztworu soli) ani nierozpuszczalnych w wodzie skoncentrowanych olejków eterycznych w tym produkcie. Ich użycie może zmniejszyć wydajność i skrócić żywotność produktu.
- Należy używać wyłącznie końcówek i akcesoriów zalecanych przez Water Pik, Inc.
- Jeśli końcówka Pik Pocket™ (nie dołączona do wszystkich modeli) z jakiegokolwiek powodu oddzieli się od trzonka, należy wyrzucić końcówkę i trzonek i wymienić na nową końcówkę Pik Pocket™.
- Nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych ciał obcych do otworów w produkcie.
- Nie używaj tego produktu na zewnątrz ani w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
- Przed użyciem produktu należy zdjąć biżuterię z jamy ustnej.
- Nie używać w przypadku otwartych ran na języku lub w jamie ustnej.
- Produkt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika i nie wymaga on konserwacji.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został upuszczony lub uszkodzony lub upuszczony do jakiegokolwiek cieczy. Należy skontaktować się z firmą Waterpik, pod numerem 89 533 87 77 lub odwiedzić stronę www.waterpik.pl.

**ZAPISZ TE
INSTRUKCJE**

Opis produktu	5
Pierwsze kroki	6
Czyszczenie i rozwiązywanie problemów z urządzeniem Waterpik® Water Flosser	9
Wyjmowanie akumulatora	10
Serwis i konserwacja	11
Informacje o gwarancji	11


SYMBOLE							
Na produkcie i/lub opakowaniu mogą znajdować się następujące symbole. Niektóre z tych symboli mogą nie być istotne w danym regionie i zostały wymienione wyłącznie w celach informacyjnych.							
Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Patrz instrukcję obsługi		Odlączony zasilacz		Nie używaj tego urządzenia pod prysznicem, w wannie i nie zanurzaj go w żadnej cieczy.		Znak zgodności z przepisami
	Producent		Napięcie prądu stałego (DC)		Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej		Oddzielna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
IPX7 or IPX4	Kod ochrony przed wnikaniem		Napięcie prądu przemiennego (AC)		Oznakowanie zgodności CE		
	Urządzenia IEC klasy II		Nie zanurzać urządzenia w żadnym płynie.		Ocena zgodności w Wielkiej Brytanii		

1. Rotator końcówki
2. Przełącznik zasilania
3. Kontrola ciśnienia
4. Uchwyt zasilania
5. Wlot ładowarki
6. Końcówka
7. Przycisk wysuwania końcówki
8. Odchylany górny wlot wody
9. Zbiornik
10. Kabel USB do ładowania

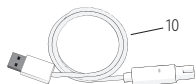


Kabel USB do ładowania

- 20031307-1 White
20031307-2 Black

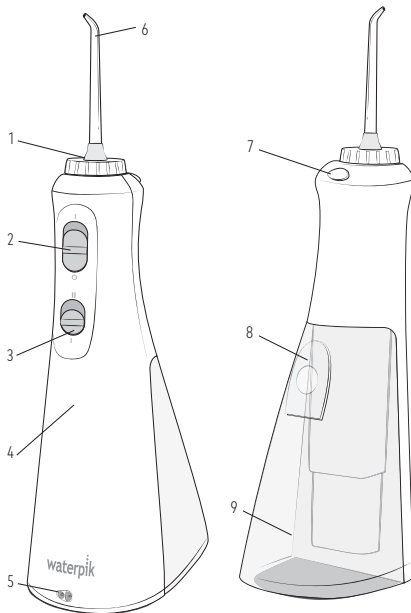

NIE WSZYSTKIE KOŃCÓWKI SĄ DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH MODELACH

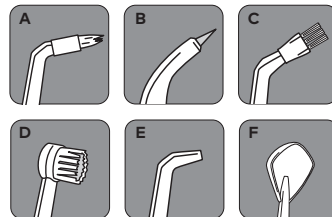

**Wymieniać co 3 miesiące **Wymieniać co 6 miesięcy

KOŃCÓWKI:

- A. Ortodontyczna***
 - aparat ortodontyczny
- B. Pik Pocket™***
 - kieszonki przyzębne
- C. Plaque Seeker™ Tip***
 - implanty/korony/mosty/zastosowanie ogólne
- D. Szczoteczka****
 - zastosowanie ogólne
- E. Klasyczna***
 - zastosowanie ogólne
- F. Do czyszczenia języka****
 - czyszczenie języka

Wymienne końcówki/akcesoria można zakupić online na naszej stronie www.waterpik.pl


*Ładowarka USB nie jest dołączona do wszystkich konfiguracji produktu.

Ładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem

Urządzenie należy ładować przez 24 godziny przed pierwszym użyciem. Należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki USB. Jeśli ładowarka USB nie została dostarczona, do ładowania tego produktu wymagana jest dostarczona przez użytkownika ładowarka USB o następujących parametrach: USB Typ-A, Wyjście znamionowe: 5,0 VDC, 1,0 A. Podłącz ładowarkę USB do gniazdka ściennego i podłącz przewód ładujący do urządzenia. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji OFF (0). Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli przełącznik znajduje się w pozycji ON (I). Patrz "Czyszczenie i rozwiązywanie problemów z urządzeniem do płukania jamy ustnej Waterpik®", aby dowiedzieć się, jak dbać o akumulator. Irygator Waterpik® będzie naładowany przez okres do 2 tygodni, w zależności od sposobu użytkowania.

Napełnianie zbiornika



Podnieś kłapkę na zbiorniku i napełnij zbiornik letnią wodą.

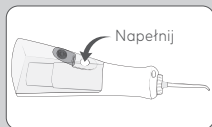

Wkładanie i wyjmowanie końcówek

Włóż końcówkę do środka pokrętki na górze uchwytu Irygatora. Kolorowy pierścień zrówna się z końcem pokrętki, jeśli końcówka jest prawidłowo zablokowana. Aby wyjąć końcówkę z uchwytu, naciśnij przycisk wysuwania końcówki i wyciągnij końcówkę z uchwytu.

UWAGA: Nie należy naciskać przycisku wysuwania końcówki podczas pracy urządzenia.

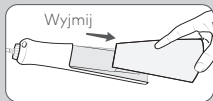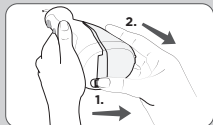

Regulacja ustawienia ciśnienia

Ustawienie ciśnienia w urządzeniu WP-490 można regulować, przesuwając przełącznik ciśnienia na uchwycie.

Zalecana technika

Pochyl się nisko nad zlewem i umieść końcówkę w ustach. Skieruj końcówkę w stronę zębów i włącz urządzenie (I).

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zacznij od tylnych zębów i pracuj w kierunku przednich zębów. Przesuń końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymaj na chwilę między zębami. Kontynuuj, aż wyczyścisz wewnętrzną i zewnętrzną stronę górnych i dolnych zębów.

Skieruj strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł. Lekko zaciśnij usta, aby uniknąć rozpryskiwania, ale pozwól wodzie swobodnie wypływać z ust do zlewu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, urządzenie należy trzymać pionowo.

Po zakończeniu

Wyłącz urządzenie. Opróżnij zbiornik z płynu.

W razie potrzeby zbiornik można wyjąć z uchwytu zasilania, przesuwając zatrzask zwalniający zbiornik do pozycji odblokowania(1) a następnie przesuwając zbiornik w dół w kierunku podstawy urządzenia(2).

Aby zamontować zbiornik na uchwycie, wystarczy przesunąć go w górę w kierunku górnej części urządzenia.

Zbiornik zatrzaśnie się na miejscu po całkowitym zablokowaniu.

UWAGA: NIE WSZYSTKIE KOŃCÓWKI SĄ DOŁĄCZONE DO WSZYSTKICH MODELI.

ZASTOSOWANIE KOŃCÓWEK :

Końcówka Pik Pocket™

Końcówka Pik Pocket™ została specjalnie zaprojektowana do dostarczania wody lub roztworów antybakteryjnych głęboko do kieszonek przyzębnych. Aby użyć końcówki Pik Pocket™, ustaw urządzenie na najniższe ustawienie ciśnienia. Przyłóż miękką końcówkę do zęba pod kątem 45 stopni i delikatnie umieść końcówkę pod linią dziąseł, w kieszonce.

Końcówka do czyszczenia języka

Ustaw najniższe ciśnienie, umieść końcówkę na środku języka mniej więcej w połowie jego długości. Lekko pociągnij do przodu. Zwiększ ciśnienie zgodnie z preferencjami.

Końcówka ortodontyczna


Aby użyć końcówki ortodontycznej, delikatnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę, aby lekko wyszczotkować obszar między zębami i wokół zamka ortodontycznego, zanim przejdziesz do następnego zęba.

Końcówka szczoteczka

Umieścić końcówkę szczoteczki w jamie ustnej z główką szczoteczki na zębie przy linii dziąseł. Końcówka szczoteczki może być używana z lub bez pasty do zębów. Używając lekkiego nacisku (włosie nie powinno się wyginać), masuj szczoteczkę do przodu i do tyłu, wykonując bardzo krótkie pociągnięcia - podobnie jak w przypadku ręcznej szczoteczki do zębów.

Końcówka Plaque Seeker™

Aby użyć końcówki Plaque Seeker™, umieść ją blisko zębów, tak aby włosie delikatnie dotykało zębów. Delikatnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę między zębami, aby delikatnie wyszczotkować i pozwolić wodzie przepływać między zębami.

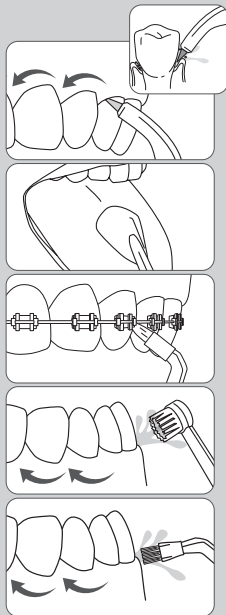

Używanie płynu do płukania jamy ustnej i innych roztworów

Urządzenie Waterpik® Water Flosser może być używane do podawania płynów do płukania jamy ustnej i roztworów antybakteryjnych. Po użyciu jakiegokolwiek specjalnego roztworu należy przepłukać urządzenie, aby zapobiec zatkaniu, częściowo napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchamiając urządzenie z końcówką skierowaną do zlewu, aż urządzenie będzie puste.

Czyszczenie

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby wyczyść produkt, używając miękkiej szmatki i łagodnego, nieściernego środka czyszczącego do przetrarcia powierzchni zewnętrznej. Zbiornik na wodę jest wyjmowany w celu ułatwienia czyszczenia i można go myć w zmywarce. Zaleca się cotygodniowe wyjmowanie i czyszczenie zbiornika.








Usuwanie osadów z twardej wody / ogólne czyszczenie

Osady z twardej wody mogą gromadzić się w urządzeniu w zależności od zawartości minerałów w wodzie. Pozostawione bez nadzoru, może utrudnić działanie urządzenia.

Czyszczenie części wewnętrznych: dodaj 1 łyżkę stołową białego octu do pełnego zbiornika ciepłej wody. Skieruj uchwyt i końcówkę do zlewu. Włącz urządzenie (I) i pracuj, aż zbiornik będzie pusty. Przepłukać, powtarzając czynność z pełnym zbiornikiem czystej, ciepłej wody. Proces ten należy przeprowadzać co 1 do 3 miesięcy, aby zapewnić optymalną wydajność.

Konserwacja akumulatora

Urządzenie nie będzie ładowane, jeśli przełącznik znajduje się w pozycji ON (I). Jeśli urządzenie WP-490 jest używane raz dziennie lub rzadziej, zaleca się ładowanie go przez noc, raz w tygodniu. Jeśli urządzenie jest używane dwa lub więcej razy dziennie, należy ładować je częściej. Nie należy całkowicie rozładowywać baterii, ponieważ może to skrócić ich żywotność.

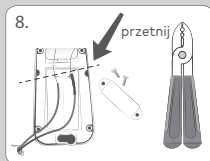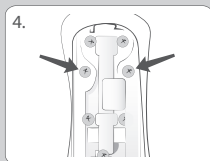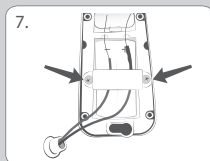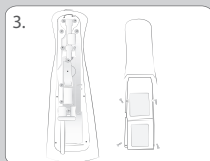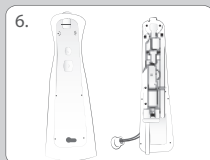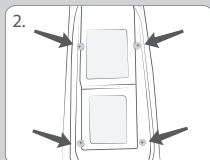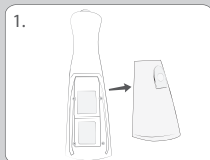

Demontaż akumulatora

Produkt zawiera baterię i/lub odpady elektroniczne nadające się do recyklingu. W celu ochrony środowiska nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu eksploatacji baterii należy ją zutylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami administracyjnymi. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnym działem gospodarki odpadami. W przypadku samodzielnej utylizacji akumulatora niklowo-wodorkowego, na przykład w modelach WP-490, przed wyjęciem akumulatora należy go całkowicie rozładować i wykonać poniższe czynności w celu wyjęcia akumulatora:

1. Wyłącz urządzenie, pociągnij zatrzask zwalniający zbiornik i wyjmij zbiornik.
2. Wykręć cztery śruby.
3. Zdejmij tylny uchwyt.
4. Wykręć dwie śruby.
5. Zdejmij rotator końcówki, podważając go płaskim śrubokrętem.
6. Zdejmij obudowę z urządzenia.
7. Odwróć obudowę, aby odstąpić baterię. Wykręć dwie śruby.
8. Przeciąć dwa przewody i podważyć baterię z obudowy.

Wyjętą baterię należy bezpiecznie zutylizować w specjalnym centrum recyklingu.

OSTRZEŻENIE: Bateria tego produktu jest wymienna.

Aby ją wymienić, skontaktuj się z serwisem Waterpik.

Serwisowanie urządzenia

Irygatory wodne Waterpik® nie posiadają elementów elektrycznych, które mogą być serwisowane przez użytkownika i nie wymagają rutynowej konserwacji. Wszystkie dostępne części i akcesoria można znaleźć na stronie www.waterpik.pl. Można również zadzwonić na numer obsługi klienta 89 533 87 77. We wszelkiej korespondencji należy powoływać się na numer seryjny i numer modelu. Numery te znajdują się na spodzie urządzenia.

Nadal masz pytania? Przejdź na stronę www.waterpik.pl

SERWIS i GWARANCJA 12 miesięcy

POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu 1go roku od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnioną gwarancję w oryginale, POLKARD Bis Sp. z o.o. naprawi lub wymieni jakkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem: POLKARD BIS Sp, z o.o ul. Marka Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850 w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

WARUNKIEM UZNANIA REKLAMACJI W RAMACH GWARANCJI JEST DOSTARCZENIE NINIEJSZEJ GWARANCJI WRAZ Z URZĄDZENIEM.



Polkard *bis*

Wszelkie prawa zastrzeżone.