

Silk'n
Beautiful Technology

SONICSMILE (DELUXE)

SG-986



EN INSTRUCCJA OBSŁUGI

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

FR MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZING

ES MANUAL DE USUARIO

PT MANUAL DO UTILIZADOR

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

TR KULLANIM KILAVUZU

IT MANUALE D'USO

NO BRUKERHÅNDBOK

SV ANVÄNDARMANUAL

DA BRUGERMANUAL

Prawa autorskie 2021 © Home Skinovations Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nota prawna

Home Skinovations Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach lub specyfikacjach w celu poprawy wydajności, niezawodności lub możliwości produkcyjnych. Informacje dostarczone przez Home Skinovations Ltd. są uważane za dokładne i wiarygodne w momencie ich publikacji. Home Skinovations Ltd. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Żadna licencja nie jest udzielana przez domniemanie lub w inny sposób na podstawie jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych Home Skinovations Ltd.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub przekazywana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Home Skinovations Ltd. Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Home Skinovations Ltd. posiada patenty i oczekujące wnioski patentowe, znaki towarowe, 2.prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące przedmiot niniejszego dokumentu. Dostarczenie tego dokumentu nie daje użytkownikowi żadnej licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w pisemnej umowie z Home Skinovations Ltd. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Home Skinovations Ltd.

Invention Work B.V

Donk I B, 2991 LE Barendrecht


Holandia

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Spis treści

Schemat ogólny	5
Zawartość opakowania/części urządzenia	6
Informacje ogólne	7
Odczytywanie i przechowywanie instrukcji obsługi	7
Objaśnienie symboli	8
Bezpieczeństwo	9
Właściwe użytkowanie	9
Instrukcje bezpieczeństwa 10	10
Pierwsze użycie	20
Sprawdzanie szczoteczki do zębów i zawartości opakowania	20
Podstawowe czyszczenie	21
Obsługa	21
Ładowanie akumulatora	21
Ładowanie za pomocą podręcznego etui ładującego (wersja Deluxe)	22
Używanie szczoteczki	23
Mycie zębów	24
Czyszczenie języka za pomocą czyścika do języka (wersja Deluxe)	26
Wybór trybu	26
Czyszczenie	28
Przechowywanie	29
Rozwiązywanie problemów	30
Dane techniczne	32
Deklaracja zgodności	34
Utylizacja	34
Utylizacja opakowania	34
Utylizacja szczoteczki do zębów	34
Gwarancja	36
Obsługa klienta	37

Przegląd PL

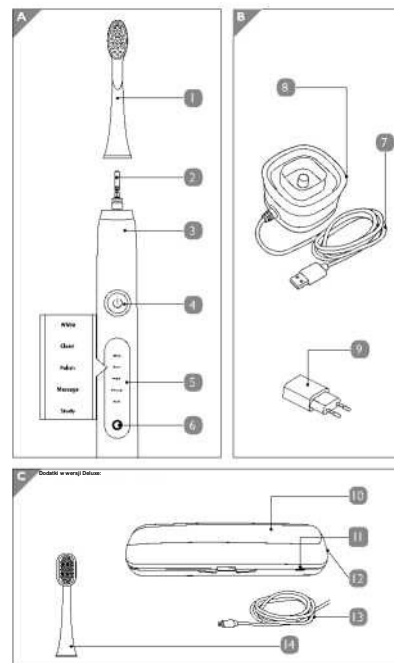

Uwaga: Zwrócić uwagę na symbol ostrzeżenia w zakładce od obsługi modelu.

Zawartość urządzenia

opakowania/części

- 1 Główka szczoteczki, 2*
- 2 Punkt mocowania szczotki
- 3 Rękojeść
- 4 Przycisk wielofunkcyjny
- 5 Wskaźnik LED trybu
- 6 Wskaźnik poziomu naładowania
- 7 Przewód główny z portem USB
- 8 Stacja ładująca
- 9 Adapter USB
- 10 Podróżne etui ładujące
- 11 Wskaźnik poziomu naładowania
- 12 Port micro USB
- 13 Kabel micro USB
- 14 Czyścik do języka, 2x

Informacje ogólne

Odczytywanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do szczoteczki SonicSmile (Deluxe) SG-986 (zwanej dalej „szczoteczką”). Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi. Przed użyciem szczoteczki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie szczoteczki do zębów. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Podczas pobytu za granicą należy również przestrzegać wytycznych i przepisów obowiązujących w danym kraju. Instrukcję obsługi należy przechowywać do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania szczoteczki osobom trzecim należy bezwzględnie dołączyć do niej niniejszą instrukcję obsługi.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi, na szczoteczce do zębów lub na opakowaniu używane są następujące symbole i słowa sygnalizacyjne.



Ten symbol/słowo sygnalizuje zagrożenie o umiarkowanym stopniu ryzyka, które może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń, jeśli się go nie uniknie.



Ten symbol/słowo sygnalizuje zagrożenie o niskim ryzyku, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.



To słowo sygnałowe ostrzega przed potencjalnym uszkodzeniem mienia.



Ten symbol zawiera przydatne dodatkowe informacje dotyczące montażu lub obsługi.

Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Bezpieczeństwo

Właściwe użytkowanie

Szczoteczka została zaprojektowana wyłącznie do czyszczenia zębów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Szczoteczki należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować

uszkodzeniem mienia, a nawet obrażeniami ciała. Szczoteczka do zębów nie jest zabawką dla dzieci.

Silk'n nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



6

Ryzyko porażenia prądem!

Wadliwa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe mogą spowodować porażenie prądem.

- Stację ładującą lub etui ładujące należy podłączać tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe gniazda jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
- Nie można wymieniać głównego przewodu stacji ładującej. W

przypadku uszkodzenia stacja ładująca musi zostać zutylizowana.

- Stację ładującą lub etui ładujące należy podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można było szybko odłączyć je od sieci.
- Nie używać szczoteczki do zębów, stacji ładującej lub etui ładującego, jeśli wykazują one widoczne uszkodzenia lub główny przewód lub port USB są uszkodzone.
- Nie należy otwierać obudowy; naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu specjalście. W tym celu należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. Odpowiedzialność i roszczenia gwarancyjne zostają zniesione w przypadku napraw wykonywanych przez użytkownika; niewłaściwego podłączenia urządzenia lub niewłaściwego użytkowania.

- Do naprawy mogą być używane wyłącznie części zgodne z oryginalnymi informacjami o urządzeniu. Części elektryczne i mechaniczne, które są niezbędne do zapewnienia ochrony przed źródłami zagrożeń, znajdują się w tej szczoteczce do zębów.
- Stacja ładująca lub etui ładujące nie mogą być obsługiwane za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu telesterowania.
- Nie zanurzać stacji ładującej, przewodu głównego ani etui ładującego w wodzie lub innych płynach.
- Nigdy nie dotykać portu USB wilgotnymi rękami.
- Nigdy nie wyciągać portu USB z gniazda za główny przewód.
- Nigdy nie używać głównego przewodu jako

paska do przenoszenia.

- Przechowywać stację ładującą lub etui ładujące, szczoteczkę do zębów i port USB z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Nie zaginać głównego przewodu i nie kłaść go na ostrych krawędziach.
- Stacji ładującej lub etui ładującego należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nigdy nie należy ustawiać stacji ładującej lub etui ładującego w taki sposób, aby istniało ryzyko ich wpadnięcia do wanny lub zlewu.
- Nigdy nie należy chwycić stacji ładującej lub etui ładującego, jeśli wpadły one do wody. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć port USB.
- Ładować szczoteczkę do zębów jedynie

za pomocą dołączonej stacji ładującej lub etui ładującego. Należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera USB i kabla micro USB.

- Należy upewnić się, że dzieci nie włożyły żadnych przedmiotów do stacji ładującej, etui ładującego lub rękojeści.
- Odłączyć port USB, gdy nie używamy stacji ładującej lub etui ładującego, po zakończeniu procesu ładowania, przed czyszczeniem szczoteczki do zębów lub odłożeniem jej na miejsce, lub w przypadku usterki.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko oparzeń chemicznych!

Wyciek płynu z akumulatora może prowadzić do oparzeń chemicznych.

- Nie wolno dopuścić do kontaktu kwasu z akumulatora ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi.
- W przypadku kontaktu z kwasem z akumulatora należy natychmiast przemyć

miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorami może spowodować wybuch.

- Nie wolno zwierać akumulatorów.
- Nie wolno demontować akumulatorów.

- Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia.
- Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- W żadnym wypadku nie należy otwierać akumulatorów.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych), lub osób bez doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Ta szczoteczka do zębów może być używana przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie używać szczoteczki do zębów i zrozumiały ryzyko

związane z jej obsługą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieci poniżej ósmego roku życia należy trzymać z dala od szczoteczki do zębów.
- Nie pozostawiać szczoteczki bez nadzoru podczas jej używania.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się małymi częściami. Dzieci mogą połknąć małe części i zadławić się.

UWAGA!

Ryzyko obrażeń!

Nieprawidłowe obchodzenie się ze szczoteczką do zębów może spowodować obrażenia.

- Przewód główny należy ułożyć tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Natychmiast wymieniać zużyte lub uszkodzone główki szczoteczki, aby zapobiec obrażeniom jamy ustnej i okolic zębów.

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się ze szczoteczką może spowodować jej uszkodzenie.

- Nie upuszczać rękojeści. Jeśli tak się stanie, nie

używać szczoteczki do zębów. Należy zlecić sprawdzenie w autoryzowanym punkcie serwisowym.

- Jeśli chcemy wymienić główkę szczoteczki, należy wyłączyć szczoteczkę.
- Umieścić stację ładującą lub etui ładujące na łatwo dostępnej, równej i suchej powierzchni.
- Należy upewnić się, że główny przewód, stacja ładująca lub etui ładujące oraz szczoteczka do zębów nie stykają się z gorącymi elementami.
- Zaprzestać używania szczoteczki do zębów, jeśli jej plastikowe części wykazują pęknięcia, złamania lub są zdeformowane.

Pierwsze użycie

Sprawdzanie szczoteczki do zębów i zawartości opakowania

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Niezachowanie ostrożności podczas otwierania opakowania ostrym nożem lub innym spiczastym przedmiotem może spowodować szybkie uszkodzenie szczoteczki do zębów. - Podczas otwierania opakowania należy zachować szczególną ostrożność.

1. Należy wyjąć szczoteczkę i jej akcesoria z opakowania.
2. Sprawdzić, czy zestaw jest kompletny (patrz **Rys. A, B i C** (ten ostatni dla wersji Deluxe)).
3. Sprawdzić, czy szczoteczka do zębów lub

poszczególne jej części nie są uszkodzone. Jeśli są, nie należy używać szczoteczki do zębów. Należy skontaktować się z centrum serwisowym Silk'n w najbliższej okolicy (patrz rozdział „Obsługa klienta”).

Podstawowe czyszczenie

1. Usunąć materiał opakowaniowy i wszystkie folie ochronne.
2. Przed pierwszym użyciem wyczyścić wszystkie części szczoteczki zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

Obsługa

Ładowanie akumulatorka

1. Podłączyć główny przewód z portem USB 7 do dołączonego adaptera USB 9
2. Umieścić szczoteczkę do zębów na stacji ładującej 8. Szczoteczka do zębów będzie teraz ładowana indukcyjnie.

3. Wskaźnik poziomu naładowania 6 świeci na czerwono podczas procesu ładowania.
4. Szczoteczka jest w pełni naładowana po około 8 godzinach, a wskaźnik poziomu naładowania gaśnie.
Po pełnym naładowaniu akumulatorów może działać nawet przez 3 tygodnie.

Ładowanie za pomocą podróznego etui ładującego (wersja Deluxe)

1. Umieścić rękojeść 3 w etui do ładowania 10. Włożyć kabel micro USB 13 do portu micro USB 12 w etui, a drugi koniec do adaptera USB 9. Następnie podłączyć adapter USB do gniazda ściennego. Szczoteczka do zębów będzie teraz ładowana indukcyjnie.
Można również ładować za pomocą dowolnego urządzenia z certyfikatem CE i portem USB. W takim przypadku należy włożyć kabel micro USB do gniazda micro USB obudowy, a drugi koniec do portu USB urządzenia.
2. Wskaźniki poziomu naładowania 6 11 na szczoteczce i etui świecą się na czerwono podczas procesu ładowania.
3. Szczoteczka jest w pełni naładowana po około 8 godzinach, a wskaźniki poziomu naładowania gasną. Po pełnym naładowaniu akumulatorów może działać nawet przez 3 tygodnie.

Używanie szczoteczki

UWAGA!

Ryzyko obrażeń!

Nieprawidłowe obchodzenie się ze szczoteczką do zębów może spowodować obrażenia.

- Nie wywierać zbyt dużego nacisku na szczoteczkę i zęby podczas ich szczotkowania.

- Przy pierwszych kilku użyciach szczoteczki mogą krwawić dziąsła. Jeśli dziąsła krwawią dłużej niż 14 dni, należy skonsultować się z dentystą.

- Szczotkować zęby jak najbliżej dziąseł.
- Szczotkować zęby wykonując małe ruchy okrężne.
- Czyścić przestrzenie między zębami.



Mycie zębów

1. Przymocować główkę szczoteczki 1 do rękójści 3 w taki sposób, aby punkt mocowania szczoteczki 2 rękójści sięgał do główki szczoteczki.

Główka szczoteczki musi w słyszalny i wyczuwalny sposób zablokować się na swoim miejscu.

Główka szczoteczki musi być skierowana w stronę przycisku wielofunkcyjnego 4

2. Umoczyć główkę szczoteczki przez chwilę w czystej wodzie, aby ją zwilżyć.

3. Nalożyć na główkę szczoteczki ilość pasty do zębów wielkości ziarnka grochu.
4. Ostrożnie przysunąć główkę szczoteczki do zębów.
5. Wybrać żądany tryb, naciskając przycisk wielofunkcyjny w ciągu 3 sekund (patrz rozdział „Wybór trybu”). Odczekać ponad 3 sekundy, aby wyłączyć szczoteczkę.
6. Szczotkować górną i dolną część zębów, a także zewnętrzną i wewnętrzną stronę zębów przez 30 sekund, nie wywierając nacisku.



Po każdych 30 sekundach szczoteczka zatrzyma się na 0,5 sekundy i automatycznie wyłączy się po 2 minutach.

7. Po każdym użyciu należy wyczyścić szczoteczkę zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

Czyszczenie języka za pomocą czyścika do języka (wersja Deluxe)

1. Zwiżyć czyścik do języka 14 i szczotkować język stroną z mikrowłóskami, wykonując ruchy w przód i w tył przez 30 sekund. Czyścić tak daleko, jak to możliwe.
2. Przepłukać usta i używać strony do skrobienia na języku przez 30 sekund.

Wybór trybu

Wskaźnik LED trybu 5 wyświetla bieżący tryb.

Funkcja	Obsługa	Opis
Biel	Nacisnąć 1 x	Dla białych zębów i mniejszych przebarwień.
Czyszczenie	Nacisnąć 2x	Do usuwania płytki nazębnej, idealne dla wrażliwych zębów i dziąseł.
Funkcja	Obsługa	Opis
Polerowanie	Nacisnąć 3x	Do polerowania zębów.

Masaż	Nacisnąć 4x	Do delikatnego masażu dziąseł i poprawy ich zdrowia.
Nauka	Nacisnąć 5x	Ustawienie umożliwiające przyzwyczajenie się do szczoteczki do zębów. Intensywność wibracji stopniowo wzrasta od słabej do silnej podczas pierwszych 12 zastosowań.

Czyszczenie

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowe obchodzenie się ze szczoteczką może spowodować jej uszkodzenie.

- W żadnym wypadku nie należy czyścić szczoteczki do zębów, stacji ładującej ani etui ładującego w zmywarce: W rezultacie części te zostałyby zniszczone.
- Nie zanurzać stacji ładującej ani etui ładującego w wodzie lub innych płynach.
- 1. Po każdym użyciu należy przytrzymać główkę szczoteczki 1 pod bieżącą wodą i włączyć szczoteczkę.
- 2. Usunąć resztki pasty do zębów z główki szczoteczki i rękojeści 3 i ponownie wyłączyć szczoteczkę.
- 3. Zdjąć główkę szczoteczki z rękojeści.
- 4. Wyczyścić również główkę szczoteczki, trzymając ją pod bieżącą wodą.
- 5. Wysuszyć główkę szczoteczki i rękojeść. Wyczyścić podstawę ładującą i/lub etui ładujące miękką, wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha.
- 6. Wymieniać główkę szczoteczki nie rzadziej niż co 3 miesiące.
Gdy tylko kolor główki szczoteczki wyblaknie, należy



ją wymienić. Nowe główki szczoteczki można zakupić na naszej stronie internetowej pod adresem www.silkn.eu.

Przechowywanie

Przed przechowywaniem wszystkie części muszą być całkowicie suche.

- Szczoteczkę należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.
- Do przechowywania należy używać oryginalnego opakowania, podobnego pudełka lub podróznego etui ładującego.

- Przechowywać szczoteczkę do zębów tak, aby była bezpiecznie zamknięta i niedostępna dla dzieci.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Szczoteczka do zębów nie ładuje się.	Stacja ładująca lub etui ładujące są uszkodzone.	Wypróbować inne gniazdka lub złącza USB i ładować szczoteczkę przez co najmniej 8 godzin.
	Złącze USB jest uszkodzone.	Wypróbować inne gniazdka lub złącza USB i ładować szczoteczkę przez co najmniej 8 godzin.
	Stacja ładująca lub etui ładujące są uszkodzone.	Wymienić stację ładującą lub etui ładujące w okresie gwarancyjnym.
Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie

Szczoteczka działa przez niewielką ilość wibracji.	Akumulatoryc jest wyczerpany.	Ładować szczoteczkę przez co najmniej 8 godzin.
Szczoteczka nie działa przez 2 minuty.	Akumulatoryc jest wyczerpany.	Ładować szczoteczkę przez co najmniej 8 godzin i upewnić się, że szczoteczka jest prawidłowo umieszczona na stacji ładującej lub w etui ładującym.

Dane techniczne

Model: SG-986

Stacja ładowania

Zasilanie: DC 5V

Zużycie mocy: 1,5 W

Klasa ochrony: II

Oznaczenie IP: IPX7

Wymiary

(dł. x szer. x wys.): 6,2 x 6,2 x 4,3 cm

Rękojeść

Akumulator: 3,7 V, 700 mAh

Czas pracy: 42razy/pełne naładowanie

Czasomierz: 0,5 sekundy przerwy
po około 30
sekundach,
dezaktywacja po 2
minutach

Wymiary

(dł. x szer. x wys.): 2,6x2,7x25,4 cm

Adapter

Numer modelu: MPS006-050I00CG

Zasilanie: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,2A

Moc wyjściowa: 5,0 VDC 1,0 A 5,0 W

Klasa ochrony: II

Oznaczenie IP: IP44

Podróżne etui ładujące (wersja Deluxe)

Wymiary

Model: SG-209

Napięcie pracy: DC 5v === 300mA

Moc: 1,5W

Wymiary

(dł. x szer. x wys.): 22,6x6,4x3,6 cm

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem podanym na odwrocie.

Utylizacja

Utylizacja opakowania

Opakowania należy utylizować z podziałem na poszczególne rodzaje materiałów. Tekturę i karton należy utylizować jako makulaturę i folię za pośrednictwem usługi zbiórki surowców wtórnych.



Utylizacja szczoteczki do zębów

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów wielokrotnego użytku)

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi!



Jeśli w pewnym momencie nie jest już możliwe korzystanie ze szczoteczki do zębów, każdy konsument **jest prawnie zobowiązany do pozbycia się starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych**, np.

w punkcie zbiórki w swojej gminie/dzielnicy. Gwarantuje to, że stare urządzenia są poddawane recyklingowi w profesjonalny sposób, a także wyklucza negatywne konsekwencje dla środowiska. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane do odpadów domowych!



Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do dostarczenia wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, do punktu zbiórki prowadzonego przez gminę lub dzielnicę, lub do sprzedawcy detalicznego; tak, aby można je było zutilizować w

sposób przyjazny dla środowiska

Przynieś całą szczoteczkę do zębów (z akumulatorem) do punktu zbiórki i upewnij się, że nie jest naładowana!

*oznaczone jako: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Gwarancja

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z europejskimi przepisami i prawem. Zakres gwarancji na ten produkt jest ograniczony do wad technicznych spowodowanych wadliwymi procesami produkcyjnymi. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania wskazówek. Być może będzie on w stanie rozwiązać Twój problem bez konieczności zwracania produktu do sklepu lub naszego centrum serwisowego. Nasza obsługa klienta zawsze chętnie Ci pomoże!

Obsługa klienta

Aby uzyskać więcej informacji o produktach Silk'n odwiedź regionalną stronę internetową Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, wadliwe, wymaga naprawy lub potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym Silk'n

Numer serwisu: 0906-2130009

Email: customerareuk@silkn.eu

Silk'n

Beautiful Technology

Invention Works B.V.
Donk IB, 2991 LE Barendrecht
Holandia

InnoEssentials Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6, 49661
Cloppenburg Deutschland

www.silkn.eu • info@silkn.eu



© 2021 Home Skinovations Ltd. Wszelkie prawa
zastrzeżone. SILK'N i logo SILK'N są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Home Skinovations Ltd.

